

# LABELS-RS 試薬管理システム Ver.3.5

試薬管理の“高効率化”と“リスク管理”を両立します！


## Ver.3.0の機能に加え、より便利に！

- ★ 棚卸の金額集計を、机上で簡単に済ませたい！
- ★ 毒物試薬の使用承認、毎回台帳に手記入提出・正直面倒だ！
- ★ 毒劇物等、秤量対象試薬の直近風袋重量を一覧表示！
- ★ 廃棄試薬！社内に「有る」・「無し」を把握したい！

### これらの機能に加え！

- ★ 試薬発注タイミングのお知らせ機能。最後の1本を開封し、さらに全内容量に対する%設定でアラート表示と進化！
- ★ クロロホルム等比重差の大きい液体試薬の秤量は、比重をマスタ登録しておくことで、適正なg換算値で残容量表示！
- ★ 秤量の保留：秤量作業の途中で席を外す場面に遭遇しても、戻ってから続きの作業に就くことが可能！ 等々…。

- 1試薬につき1つ、固有の管理番号を取得！

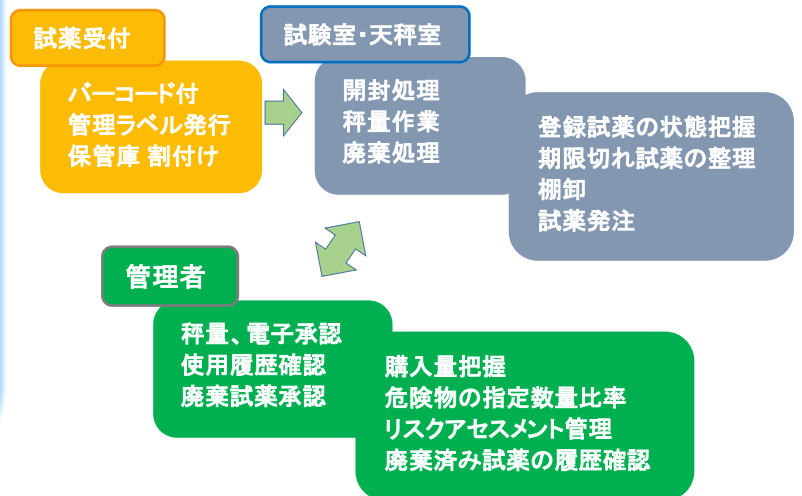

## ◇システム構成イメージ

社内Webサーバー



管理ラベルシール

◇用途に合わせて3種類から選択

1,4-ジメチル標準原液	
クロマト分析室/冷凍庫H07	
購入日	2017/03/02
品質期限	2022/03/01
開封日	/ /
有効期限	1年
11825	

P-Touch テープ幅36mm用

1,4-ジメチル標準原液	
クロマト分析室/冷凍庫H07	
購入日	2016/07/15
品質期限	2017/05/31
開封日	/ /
有効期限	1年
H8264	

耐酸・耐溶剤仕様 小型ロール紙タイプ

※別途専用プリンターが必要です

1,4-ジメチル標準原液	
水質試験用	2 mL
保管場所	クロマト分析室/冷凍庫H07
品質期限	2017/05/31
開封日	
管理番号	H8264
有効期限	
購入日	2016/07/15

レーザープリンター仕様 A4サイズ (12ラベル/1Sheet)

## タブレット版との併用

- ① 作業現場で試薬の検索ができます
  - ② 手元で在庫確認ができます
  - ③ 開封・廃棄の処理作業ができます
  - ④ 出庫・入庫の管理ができます  
(現在誰が持ち出し中かを表示)
  - ⑤ タブレットの検索履歴から試薬検索できます
  - ⑥ 期限を超過した試薬を抽出できます
- ※Webブラウザでのご利用となります。 ※iOSを除く

## 試薬在庫管理画面

## クライアントPC

Webブラウザ (Chrome・IE) からアクセスして利用しています。  
クライアントPCの台数に制限はありません。



タブレット画面

パソコン画面

## LABELS-RSのお問合せ先

住所：〒510-0023 三重県四日市市午起 2-4-18

TEL：059-332-5122 FAX：059-331-2289

mail：webman@tokai-techno.co.jp

営業部 IT事業室 市田



# LABELS-RS 試薬管理システム Ver.3.5

## ◇動作環境

サーバー

種類	ソフト名	バージョン	備考
ウェブサーバー	IIS	7.0 以上	※IISが動作する環境であれば可能
システム実行環境	.NET Framework	4.5 以上	
データベース	SQL server	2008~2016	※Expressエディション可

クライアントPC

種類	ソフト名	バージョン	備考
ブラウザ	Chrome	32.0.1700 以上 推奨	
	Internet Explorer	11 以上	
PDFリーダー	Adobe Reader	10.1.4以上 推奨	※その他PDFが閲覧できるソフトウェアであれば可能

タブレット ※画面サイズは9.4型 WXGA (1280×800) 以上 推奨

種類	ソフト名	バージョン	備考
ブラウザ	Chrome	32.0.1700 以上 推奨	※AndroidのChromeも可
	Internet Explorer	11 以上	※iOSには対応していません

## ◇各種レポート書式

PDF書式・Excel出力

●登録試薬管理台帳

●指定数量比率一覧表

管理番号	試薬名	規格	数量	メーカー	購入日	CAS番号	単位	原産国	品質期間	Lot番号	危険物	備考
E262	硝酸	和光純薬	500	和光純薬	2013/12/27	50000-22-2	ml	日本	2013/12/27			
E275	硝酸	和光純薬	100	和光純薬	2013/12/27	50000-22-2	ml	日本	2013/12/27			

危険物区分	保存量の合計	単位	係数	指定数量(単位:kg)	指定数量計算結果	管理番号	製品番号	製品名
4-1-11	500	ml	0.001	200	0.0025	C794	498748120082	メタクリル酸メチル、モノ
4-1-11	3	l	1	200	0.015	D145	089-07913	ヘキサギン(低酸素・低

4-1-11	25	g	0.001	2000	1.25e-005	D428	40310320	3-ヘキサフルオ
4-1-11	25	g <th>0.001</th> <td>50</td> <td>0.0005</td> <td>D450</td> <td>498748130920</td> <td>過よう素酸カリウム</td>	0.001	50	0.0005	D450	498748130920	過よう素酸カリウム
4-1-11	25	g <th>0.001</th> <td>6000</td> <td>0.25e-006</td> <td>D574</td> <td>498748122818</td> <td>ヒドロキシベンゼン</td>	0.001	6000	0.25e-006	D574	498748122818	ヒドロキシベンゼン

●秤量試薬記録台帳

使用年月日	使用量	使用場所	使用者	用途	承認者
2016/01/26 10:40	217.9999	0.0000	217.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/01/26 13:03	217.9999	1.0000	216.9999	野野 拓馬	北出 知久
2016/02/01 11:04	216.9999	0.0000	214.9999	野野 拓馬	北出 知久

管理番号	試薬名	規格	数量	メーカー	購入日	CAS番号	単位	原産国	品質期間	Lot番号	危険物	備考	
1	管理番号	試薬名	規格	数量	メーカー	購入日	CAS番号 <td>単位</td> <td>原産国</td> <td>品質期間</td> <td>Lot番号</td> <td>危険物</td> <td>備考</td>	単位	原産国	品質期間	Lot番号	危険物	備考
1	管理番号	試薬名	規格	数量	メーカー	購入日	CAS番号 <td>単位</td> <td>原産国</td> <td>品質期間</td> <td>Lot番号</td> <td>危険物</td> <td>備考</td>	単位	原産国	品質期間	Lot番号	危険物	備考

※他「棚卸」Excel出

## ◇価格

- LabelS-RS Ver.3.5 ソフトウェア 700,000円(税別)
- 試薬情報一括登録 (1,000件まで) 100,000円 (税別)  
※1000件以上 別途ご相談
- 初期導入支援 (サーバーへのセットアップ) 200,000円 (税別) ~  
※交通費別

**価格についての注意!**  
サーバー、PC、タブレット、バーコードリーダー、ワイヤレススキャナーといったシステムに使用するハードウェアは、LABELS-RSソフトウェアの価格に含まれておりません。

## LABELS-RSのお問合せ先

住所: 〒510-0023 三重県四日市市午起 2-4-18 mail: webman@tokai-techno.co.jp  
TEL: 059-332-5122 FAX: 059-331-2289 営業部 IT事業室 市田

